


## UPUTSTVO ZA UPOTREBU MEDISANA MASAŽER SA INFRACRVENIM SVETLOM - IVM

Delovi masažera:

1. Masažna glava
2. Infracrveno svetlo
3. Prekidač za podešavanje za masažu i infracrveno svetlo
4. Kabl za struju

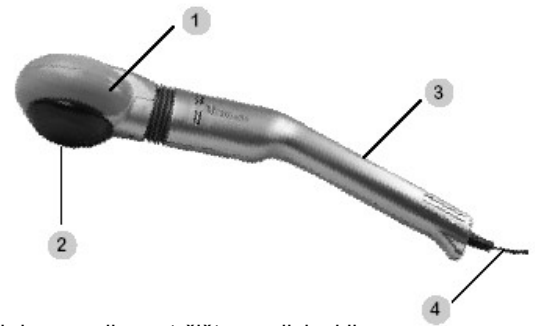

Hvala na poverenju!

Kupili ste kvalitetni proizvod nemačke firme MEDISANA, jedne od vodećih svetskih kompanija na tržištu medicinskih proizvoda. Da biste obezbedili najbolje rezultate i dugogodišnje zadovoljstvo Vasim MEDISANA IVM masažerom, pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i održavanje.

### KORISNE INFORMACIJE O MASAŽI

#### Šta je masaža?

Masaža je jedna od najstarijih metoda lečenja i važan deo fizioterapije. Mehaničkim tretiranjem tela opušta napete mišiće, poboljšava cirkulaciju i pomaže regeneraciju tkiva. Masaža je stimulativna, opuštajuća i pomaže uklanjanju bola u nervima i mišićima. Ovo znači da masaža može imati efekat stimulacije ili relaksacije, i pomaže celokupnom poboljšanju.

#### Kako radi MEDISANA IVM MASAŽER?

Ovaj masažer koristi takozvanu vibracionu masažu, gde glava masažera visokofrekventnim osciliranjem dovodi do vibracija, koje se prenose na deo tela koji se masira. Pored toga, ovaj masažer ima i opciju uključivanja infracrvenog svetla, čija se toplota prenosi kroz glavu masažera i može se uključiti zajedno sa masažom kao i nezavisno od masaže. Ovaj poseban oblik toplotnog tretmana ubrzava pozitivne efekte masaže. Kad se infracrvena lampa uključi, glava masažera se blago zagreje, ali nije vruća. Jedinstvena kombinacija intenzivne masaže i tretmana toplotom omogućava efektivnu i relaksirajuću masažu.

### SADRŽAJ PAKOVANJA

- IVM masažer
- Uputstvo za upotrebu

### SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Pre upotrebe detaljno pročitate uputstvo za upotrebu
- Masažer upotrebljavajte samo kao što je opisano u uputstvu za upotrebu.
- Ne ostavljajte masažer bez nadzora u prisustvu dece.
- Masažer nije namenjen za komercijalnu upotrebu.
- Ukoliko se uređaj pokvari ne koristite ga i ne pokušavajte sami da ga popravite. Za sve popravke obratite se uvozniku.
- Masažer možete sami da čistite, a za sve ostalo obratite se uvozniku.
- Svi masažeri se strogo kontrolišu, a vrše se i testovi na slučajnom uzorku. Zbog toga neki od aparata mogu izgledati kao da su upotrebljavani.
- Masažer držite na suvom mestu.
- Ne koristite masažer ispod jastuka ili prekrivača.
- Masažer koristiti preko odeće

### VAŽNE INFORMACIJE

- Masažer mora biti isključen pre nego što ga uključite u struju.
- Proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje masažera iste.
- Ako masažer upadne u vodu ne dirajte ga, već ga odmah isključite iz struje.
- Ako je bilo koji deo masažera oštećen ne smete da ga koristite, već se obratite uvozniku.
- Masažer ne uranjajte u vodu. Ne držite ga pod tekućom vodom.
- Držite kabl dalje od izvora toplote i oštih površina.
- Ne dodirujte masažer vlažnim ili mokrim rukama.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati masažer za kabl i pazite da vam se kabl ne zaplete.

### SAVETI

Zapamtite da kućna masaža ne može da zameni medicinski tretman u slučaju ozbiljnih pritužbi.

Ne koristite masažer:

- na glavi, grudima, kostima ili zglobovima, sa prednje strane vrata ili u delovima genitalija ili bubrega.
- ako ste u drugom stanju,
- koristite pacemaker, imate veštačke zglobove ili elektronske implante,
- patite od sledećih bolesti: problemi sa cirkulacijom, oboljenja vena, otvorenih rana, modrica, kožnih bolesti, upale vena ili tromboze, kao i kod svih akutnih stanja bolesti.

Ukoliko za vreme tretmana osetite bol ili neprijatnost, prekinite sa masažom i konsultujte se sa svojim lekarom.

### KORIŠĆENJE

Pre nego što uključite masažer u struju proverite da li je prekidač podešen na najnižu poziciju (0).

Palcem nežno pomerite prekidač (3) na gore, dok ne uključite masažer.

Infracrveno svetlo se može uključiti sa ili bez masaže. Ako želite da uključite samo infracrveno svetlo bez masaže, prekidač (3) pomerite bliže ka masažnoj glavi kako biste isključili vibraciju i u isto vreme uključili infracrvenu lampu na masažnoj glavi. Da biste uključili i masažu i infracrveno svetlo pomerite prekidač na najvišu poziciju.

## POSTUPAK MASAŽE

Ispravan način masiranja:

Možete masirati sami sebe ili partnera. Uključite ga i postavite na deo koji želite da masirate. Ne pritiskajte, već samo lagano postavite masažnu glavu na deo tela koji masirate. Efekat masaže se izvodi vibracijom samog uređaja. Upotrebom infracrvenog svetla poboljšavate efikasnost masaže. Za vreme masaže nemojte masirati samo jedan deo tela duži vremenski period, već redovno menjate deo koji masirate.

Pridržavajte se predloženih saveta.

Pojedinačan tretman ne treba da traje duže od 10 – 15 minuta.

Masaža uvek treba da bude prijatna. Ukoliko osetite bol ili neprijatnost tokom masaže, prekinite masažu i konsultujte se sa svojim lekarom.

Masažer isključite tako što ćete prekidač vratiti u početnu poziciju. Kada završite sa masažom isključite masažer iz struje.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvek isključite masažer iz struje kada ga čistite.

- Ne koristite abrazivne deterdžente ili tvrde četkice.

- Uređaj čistite mekanom vlažnom krpom sa blagim deterdžentom. Nikad ga ne uranjajte u vodu i pazite da voda ne uđe u njega. Ne koristite uređaj dok se potpuno ne osuši.

## SPECIFIKACIJA

Ime i model	Medisana IVM Masažer
Dimenzije	44 x 10 x 10 cm
Težina	0,8 kg
Izvor struje	230V / 50 HZ
Potrošnja sturje	12 W
Vreme rada	20 minuta
Uslovi korišćenja	Samo za suhu upotrebu
Uslovi skladištenja	Na hladnom i suvom mestu
Artikal broj	88210
EAN kod	40 15588 88210 4



Zadržavamo pravo da poboljšamo karakteristike ili usavršimo proizvod.

## Na kraju

Želimo Vam sreću sa Vašim MEDISANA IVM Masažerom i sigurni smo da ćete biti dugo godina zadovoljni i uživati u njegovim prijatnim efektima i koristima.

Kao jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti proizvoda za porodično zdravlje, nudimo širok spektar proizvoda u oblastima zdravstvenih ispitivanja, kućne fizioterapije, alternativne terapije protiv bola i profesionalne nege tela.

Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja u vezi ovog ili bilo kog drugog proizvoda.

## GARANCIJA I USLOVI POPRAVKE

U slučaju da imate reklamaciju obratite se uvozniku. Ako je neophodno da aparat pošaljete navedite šta nije u redu sa aparatom i priložite kopiju računa.

### Garancija pokriva sledeće:

1. Garancija važi tri godine od datuma. U slučaju reklamacije datum kupovine mora biti potvrđen datumom na računu.
2. Nedostaci uzrokovani proizvodackom greškom ili greškom u materijalu će biti besplatno popravljani u garantnom roku.
3. Garantni rok se ne produzava nakon izvršene reklamacije. Ovo se odnosi i na aparat i na rezervne delove.

### Ova garancija ne pokriva:

- a) Sve kvarove uzrokovane nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko niste pažljivo pročitali uputstvo).
- b) Sve prepravke ili pokušaje popravke od strane neovlašćenih lica.
- c) Oštećenja nastala u toku transporta do kupca.
- d) Normalno trošenje i cepanje opreme ili dodataka.

MEDISANA nije odgovorna za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje ovog proizvoda moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.

**Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:**

**VANA d.o.o.**

**Beograd, Stevana Brakusa 6,**

**tel: 011/7544-533,**

**e-mail: [vanabgd@sezampro.rs](mailto:vanabgd@sezampro.rs),**

**[www.vana.co.rs](http://www.vana.co.rs)**