


Uputstvo za upotrebu

Medisana Hidromasažna kadica WBW

Delovi:

1. Dugme za izbor različitih funkcija (isključivanje, masaža, masaža / masaža mlazom / grejanje)
2. Dva masažna rolera
3. Ispupčenja za masažu
4. Četiri centralne kugle za masažu
5. Četiri otvora za izbacivanje mlaza vode / vazduha – mehurića

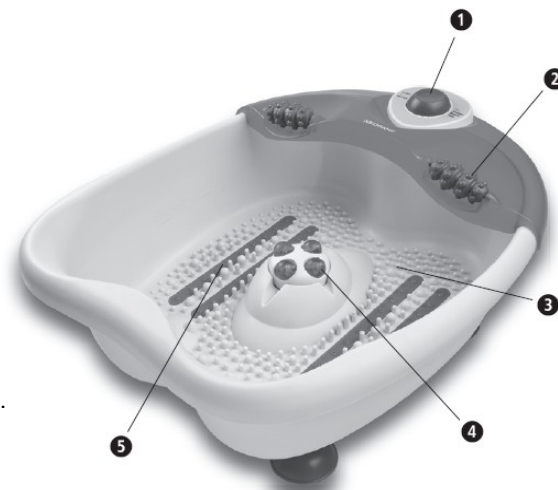

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

Simboli



Ovo uputstvo za upotrebu je za hidromasažnu kadicu WBW.



Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju. Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju. UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



Kategorija zaštite II



Broj lota



Oznaka proizvođača



Sigurnosna uputstva

Uputstva vezana za uključivanje u struju

- Pre nego što uključite hidromasažnu kadicu u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Kabl uključite u struju samo ako je hidromasažna kadica isključena.
- Ne koristite hidromasažnu kadicu ako je kabl oštećen, ako ne radi kako treba ili ako je pala ili upala u vodu.
- Ne dodirujete utikač ako stojite u vodi ili vlažnim rukama.
- Ne dodirujte hidromasažnu kadicu ako je upala u vodu već odmah isključite iz struje.
- Držite hidromasažnu kadicu i kabl dalje od vrućih površina.
- Izbegavajte kontakt hidromasažne kadice sa ostrim i šiljatim objektima.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati hidromasažnu kadicu za kabl i nemojte pritiskati kabl.
- Kabl postavite tako da možete da izbegnete opasnost od pada.
- Odmah nakon upotrebe isključite hidromasažnu kadicu iz struje.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

- Hidromasažna kadica nije dizajnirana za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Ako deca koriste hidromasažnu kadicu uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi koristila kadicu za igranje.
- Ako za vreme korišćenja osetite bilo kakvu nelagodnost obratite se lekaru i prestanite sa korišćenjem kadice.
- Ako imate zdravstvenih problema vezanih za noge kao npr. bolesti vena ili dijabetes, konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ako imate neobjašnjive bolove, oticanje nogu i stopala ili povredu mišića konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ako ste u drugom stanju konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ako osetite bol za vreme korišćenja ili ako dođe do oticanja nakon korišćenja prestanite sa upotrebom.

Uputstva vezana za korišćenje

- Hidromasažnu kadicu koristite samo u za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu, jer će u suprotnom to dovesti do poništavanja garancije.
- Hidromasažna kadica nije namenjena za komercijalnu upotrebu.
- Koristite samo u zatvorenim prostorijama i vodite računa da ne koristite u vlažnim prostorijama.
- Vodite računa da hidromasažnu kadicu koristite na sigurnoj i ravnoj površini koja nije osteljiva na vlagu.
- Hidromasažnu kadicu koristite samo sa vodom, a nikako sa drugim tečnostima.
- Nemojte stajati u kadici jer nije napravljena tako da može da podnese telesnu težinu.
- Nikada ne pokrivajte kadicu za vreme korišćenja i ne koristite ispod čebadi i jastuka.

Održavanje i čišćenje

- Možete čistiti samo samu kadicu. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara ne pokušavajte sami da je popravite jer će to dovesti do poništavanja garancije. Za sve reklamacije obratite se uvozniku.
- Nemojte uranjati kadicu u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ako u uređaj ipak prodre voda, odmah isključite iz struje.

Hvala na poverenju!

Kupovinom hidromasažne kadice WBW dobili ste proizvod vrhunskog kvaliteta firme MEDISANA. Da biste postigli željene rezultate Vašom hidromasažnom kadicom duži vremenski period, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje. Proverite da li se u pakovanju nalazi: hidromasažna kadica WBW i uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.


Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Pedikir uz pomoć hidromasazne kadice WBW

Možete koristiti hidromasažnu kadicu WBW da priuštite Vašim stopalima tretman i opuštanje nakon napornog dana. Možete izdvojiti 10 do 15 minuta za hidromasažu jednom ili dva puta dnevno. Za koju god opciju da se odlučite, vodite računa da se kadica potpuno ohladi pre nego što je ponovo koristite.

Hidromasažna kadica WBW omogućava masažu sa i bez vode. Možete puniti kadicu hladnom ili toplom vodom, međutim kadica ne može da greje hladnu vodu koju sipate, već samo usporava hlađenje već sipane tople vode.

Korišćenje kadice sa vodom

 **OPREZ:** Vodite računa da kadicu koristite na siguroj i ravnoj površini koja nije osetljiva na vlagu. Nikada ne koristite sredstva za pravljenje pene ili soli za kupanje.

Napunite kadicu toplom ili hladnom vodom do oznake za dozvoljeni nivo vode koja se nalazi sa unutrašnje strane na kadici. Postavite kadicu na pod vodeći računa da bude ravna površina, pa uključite u struju. Sedite udobno ispred kadice i podesite željenu funkciju pomoću dugmeta (1).

Izborom MASSAGE izabrali ste funkciju za stimulaciju stopala pomoću ispuščenja za masažu koja se nalaze na dnu kadice (3). Izborom MASSAGE / SPRAY BATH / HEAT aktivirate sve tri funkcije: osim što vibrira kadica dodatno blago greje, a 4 otvora za izbacivanje mlaza vode / vazduha – mehurića (5) dodatno okrepljuju Vaša stopala.

Kada završite sa hidromasažom isključite kadicu postavljajući dugme (1) u poziciju OFF. Isključite iz struje i prospite vodu iz kadice.

Korišćenje kadice bez vode

Postavite kadicu na pod vodeći računa da bude čista i ravna površina, da kadica ne može da se prevrne i uključite u struju. Sedite udobno ispred kadice i izaberite funkciju MASSAGE pomoću dugmeta (1). Stavite noge u kadicu. Ispuščenja za masažu koja se nalaze na dnu kadice (3) masiraju Vaša stopala od vrhova prstiju do pete. Nakon masaže postavite dugme (1) u poziciju OFF da biste isključili kadicu i isključite iz struje.

Dodatne mogućnosti

Osim već opisanih mogućnosti hidromasažna kadica WBW nudi i mogućnost korišćenja dva masažna dodatka uz pomoć kojih možete proširiti njegovu upotrebu sa ili bez vode, a koje takođe možete koristiti i bez da uključite kadicu.

Masažni roleri

Kotrljajte Vaša stopala preko masažnih rolera (2) intenzitetom koji Vam prija. Ovo poboljšava cirkulaciju i ima okrepljujuće dejstvo na Vaša stopala.

Masažne kugle

Koristite 4 centralne kugle za masažu (4) za masažu refleksnih zona. Ova tehnika masaže se može koristiti tako da utiče na određeni deo tela i stimuliše ga.

Čišćenje i održavanje

Pre čišćenja obavezno isključite kadicu pomoću dugmeta (1) i iz struje. Prospite vodu iz kadice i obrišite je krpom kada se potpuno ohladi. Nemojte koristiti jake deterdžente, kao npr sredstva za uklanjanje masnoća ili druge slične tečnosti jer mogu oštetiti površinu. Čuvajte na suvom i hladnom mestu. Pažljivo savijte kabl da se ne bi oštetio.

Deponovanje



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, baciti na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Specifikacija

Model	Medisana hidromasažna kadica WBW
Napajanje	230 – 240 V ~ 50 Hz
Potrošnja struje	62 W
Dimenzije (D x Š x V)	Približno 405 x 325 x 175 mm
Težina	Približno 1,7 kg
Artikal broj	88390
Ean broj	40 15588 88390 3



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Garancija i uslovi popravke

U slučaju da imate reklamaciju obratite se uvozniku. Ako je neophodno da aparat pošaljete navedite šta nije u redu sa aparatom i priložite kopiju računa i overen garantni list.

Garancija pokriva sledeće:

1. MEDISANA daje garanciju od tri godine od datuma kupovine za sve svoje proizvode. U slučaju reklamacije datum kupovine mora biti potvrđen datumom na računu.
2. Nedostaci uzrokovani proizvođačkom greškom ili greškom u materijalu će biti besplatno popravljani u garantnom roku.
3. Garantni rok se ne produžava nakon izvršene reklamacije. Ovo se odnosi i na aparat i na rezervne delove.

Ova garancija ne pokriva:

- a) Sve kvarove uzrokovane nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko niste pažljivo pročitali uputstvo).
- b) Sve prepravke ili pokušaje popravke od strane neovlašćenih lica.
- c) Oštećenja nastala u toku transporta do kupca.
- d) Normalno trošenje i cepanje opreme ili dodatka

MEDISANA nije odgovorna za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje ovog proizvoda moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs