


Uputstvo za upotrebu

Medisana kućna digitalna vaga PSW

Delovi:

1. Displej
2. Odeljak za baterije sa prekidačem za podešavanje jedinice merenja (kilogrami KG, funte LB, stones ST - 6,35 kg)
3. Platforma

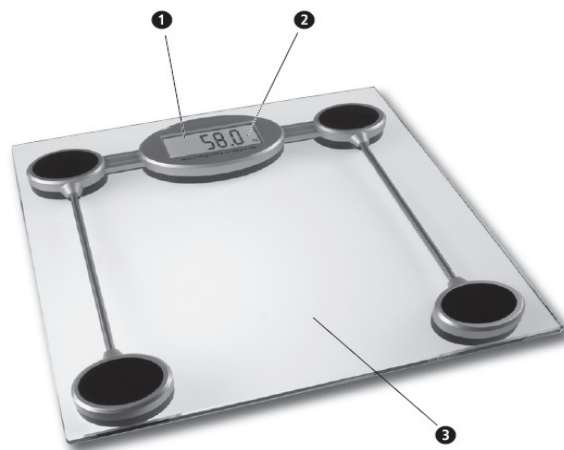

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

Simboli



Ovo uputstvo za upotrebu je za kućnu vagu PSW. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju.



Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



Broj lota



Oznaka proizvođača



Sigurnosna uputstva

Bilo koji oblik terapije ili dijete za osobe sa premlom ili prevelikom težinom zahteva stručno savetovanje profesionalca (doktor, nutricionista). Vrednosti dobijene merenjem na vagi mogu se koristiti kao korisni dodatak.



Opasnost od prevrtanja! Ne postavljajte vagu na neravnu površinu. Vodite računa da kada stojete na vagu ne stanete na uglove vage.

Nikada nemojte stajati na uglovima/ivicama vage.



Opasnost od klizanja! Nemojte stajati na vagu vlažnim ili mokrim stopalima. Skinite čarape pre nego što stanete na vagu.

- Vagu koristite samo u za to predviđene svrhe koje su opisane u uputstvu za upotrebu.

- Garancija će biti nevažeća ako je vaga korišćena u svrhe za koje nije namenjena.

- Vaga je namenjena za kućnu upotrebu. Nije namenjena za korišćenje u komercijalne svrhe u bolnicama ili medicinskim ustanovama.

- Nemojte koristiti vagu ako radi nepravilno, ukoliko je došlo do pada, ako je upala u vodu ili je oštećena.

- Maksimalna težina za koju je namenjena vaga je 150 kg / 330 lb / 24 st. Nemojte preopterećivati vagu.



Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu. Ako postavite vagu na mekanu i neravnu površinu dobijeni rezultati mogu biti netačni.

Nemojte koristiti vagu u uslovima ekstremno visoke temperature i vlažnosti vazduha. Držite vagu dalje od vode.



Rukujte vagon pažljivo. Vaga ne sme biti izložena udarcima ili vibracijama. Vodite računa da ne ispustite vagu.



Nemojte pokušavati da rasklopite vagu, u suprotnom će garancija biti poništena. Vaga ne sadrži delove kojima je potrebno održavanje ili zamena od strane korisnika osim baterija.

Ne pokušavajte sami da popravite vagu u slučaju kvara jer će to dovesti do poništavanja garancije. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku. Ako vagu ne koristite duži vremenski period, izvadite baterije.

Hvala na poverenju!

Kupovinom kućne vage PSW dobili ste proizvod vrhunskog kvaliteta firme MEDISANA. Ova vaga je namenjena za merenje telesne težine. Da biste postigli željene rezultate Vašom MEDISANA PSW vagon duži vremenski period, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje.

Proverite da li se u pakovanju nalazi: kućna vaga PSW, 1 litijumska baterija tipa CR2032 od 3V u obliku novčića i uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Karakteristike

- Visokokvalitetno sigurnosno staklo
- Visokokvalitetna tehnologija senzora
- Max. merenje do 150 kg / 330 lb / 24 st
- Podeoci po 100 g / 0,2 lb / 1/4 lb
- Mogućnost izbora jedinice merenja kg / lb / st
- Direktno merenje telesne težine
- Laka za upotrebu
- Providan LCD displej
- Uključena 1 litijumska baterija tipa CR2032 od 3V

Preduslovi koji moraju biti ispunjeni da biste dobili tačne i pouzdane rezultate merenja:

- Uvek se merite u istim uslovima
 - Uvek se merite u isto vreme
 - Stanite uspravno i mirno bez pomeranja za vreme merenja
 - Poželjno je da se merite ujutro nakon kupanja ili tuširanja vodeći računa da su Vam stopala suva
- Ukoliko se redovno merite možete dobiti pouzdane informacije o kretanju Vaše telesne težine.

Postavljanje / menjanje baterija

Jedna litijumska baterija tipa CR2032 od 3V u obliku novčića je već ubačena u vagu. Pre nego što počnete sa upotrebom morate izvući izolacionu traku iz odeljka za baterije (2) koji se nalazi sa donje strane vage. Bateriju zamenite ako se na displeju (1) pokaže znak „Lo“ ili ako se na displeju ne pokaže ništa kada uključite vagu. Da biste to uradili otvorite odeljak za bateriju koji se nalazi sa donje strane vage i postavite 1 litijumsku bateriju tipa CR2032 od 3V. Vodite računa o polaritetu baterije (pozitivni pol baterije treba da bude okrenut na gore ka poklopcu). Zatvorite poklopac.

Sigurnosne napomene vezane za baterije

Nemojte rastavljati baterije. Prazne baterije odmah izvadite iz vage. U slučaju da baterije iscuru, vodite računa da kiselina ne dođe u kontakt sa kožom, očima ili membranom sluzokože nosa ili očiju. Ako kiselina ipak dospe u kontakt sa ovim delovima tela detaljno

isperite sa puno tekuće vode i obratite se lekaru. Ako progutate bateriju, odmah se obratite lekaru. Prilikom zamene baterija uvek zamenite sve baterije istovremeno. Uvek koristite baterije iste vrste i nikad ne koristite jednu korišćenu i jednu novu bateriju. Vodite računa o polaritetu prilikom postavljanja baterija. Ukoliko ne planirate da koristite vagu duže vreme izvadite baterije. Čuvati van domašaja dece. Ne puniti baterije jer mogu da eksplodiraju. Ne praviti kratki spoj jer može doći do eksplozije. Ne bacati u vatru jer može doći do eksplozije. Ne bacati istrošene baterije zajedno sa smećem iz domaćinstva. Bacite ih na posebno predviđena mesta ili ih predajte ovlašćenom prodavcu.

Menjanje jedinice merenja

Možete postaviti različite jedinice merenja: kilogrami (kg), stone (st) ili funte (lb). Otvorite odeljak za baterije (2) koji se nalazi sa donje strane vage i korisiteći mali prekidač izaberite željenu jedinicu merenja. Zatvorite odeljak za baterije.

Merenje

1. Postavite vagu na čvrstu ravnu površinu. Sve četiri nožice moraju biti na podu. Mekana i neravna površina može uticati na rezultat merenja.
2. Uvek se merite na istoj vagi, na istom mestu i u isto vreme. Merite se bez odeće, pre obroka, poželjno je ujutro pre doručka.
3. Uključite vagu tako što ćete lagano udariti nogom blizu displeja (1). Sačekajte nekoliko sekundi. Na displeju će na kratko biti prikazan niz od četiri broja „8“, a zatim će se pojaviti „0,0 kg“.
* Napomena: Nemojte stati na vagu sve dok se na displeju ne pojavi „0,0 kg“. Ako se vaga ne koristi kao što je predviđeno to može dovesti do pogrešnih rezultata ili do toga da neće biti izmerena ni jedna vrednost.
4. Pažljivo stanite na vagu. Noge stavite ravno i jednako na mernoj površini. Ne pomerajte se. Vaša težina će biti izmerena i prikazana.
5. Vaga će se automatski isključiti čim siđete sa merne platforme.
* Napomena: Vaga će se automatski isključiti nakon približno 6 sekundi ako ste je tapkanjem uključili, a niste izvršili merenje dok je na displeju prikazano „0,0 kg“.

Moguće greške i rešenja

Na displeju se mogu pojaviti sledeće poruke o greškama:

Err

Vaga je preopterećena.

Lo

Baterije su se ispraznile i treba ih zameniti.

Ako Vaša vaga ne radi kako treba pre nego što se obratite uvozniku/serviseru možete proveriti:

- Da li su baterija postavljena kako treba
- Da li ste izabrali željenu jedinicu merenja
- Da li vaga stoji na čvrstoj i ravnoj površini, vodite računa da ne dodiruje zid ili bilo koji drugi objekat.

Ponovo se izmerite i vodite računa da stanete na vagu tek kad se na displeju prikaže „0,0 kg“

Čišćenje i održavanje

Pre čišćenja obavezno izvadite baterije. Nemojte koristiti jak deterdžent ili čvrste četke za čišćenje. Koristite mekanu malo navlaženu krpom. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili alkohol. Vodite računa da voda ne uđe u uređaj. Nakon čišćenja možete ponovo koristiti vagu tek kada je potpuno suva. Ako vagu ne planirate da koristite duže vreme izvadite baterije u suprotnom rizikujete da dođe do curenja baterija. Nemojte izlagati vagu direktnom sunčevom svetlu, zaštitite je od prljavštine i vlage. Nemojte vagu čuvati u uspravnom položaju jer to može dovesti do curenja baterija.

Deponovanje



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) baciti na za to predviđenim mestima. Molimo da izvadite baterije pre nego što bacite vagu.

Baterije nemojte baciti sa smećem iz domaćinstva već na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju

Specifikacija

Model	Medisana digitalna kućna vaga PSW
Napajanje	1 litijumska baterija tipa CR2032 od 3V u obliku novčića
Raspon merenja	Do max 150 kg / 330 lb / 24 st
Podeoci	Po 100 g / 0,2 lb / ¼ lb
Automatsko isključivanje	Nakon približno 6 sekundi
Dimenzije (D x Š x V)	Približno 30 x 30 x 3,3 cm
Težina	Približno 1,85 kg
Artikal broj	40450
Ean broj	4015588 40450 4

 Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Garancija i uslovi popravke

U slučaju da imate reklamaciju obratite se uvozniku. Ako je neophodno da aparat pošaljete navedite šta nije u redu sa aparatom i priložite kopiju računa i garnatnog lista.

Garancija pokriva sledeće:

1. MEDISANA daje garanciju od tri godine od datuma kupovine za sve svoje proizvode. U slučaju reklamacije datum kupovine mora biti potvrđen datumom na računu.
2. Nedostaci uzrokovani proizvodackom greškom ili greškom u materijalu će biti besplatno popravljani u garantnom roku.
3. Garantni rok se ne produžava nakon izvršene reklamacije. Ovo se odnosi i na aparat i na rezervne delove.

Ova garancija ne pokriva:

- a) Sve kvarove uzrokovane nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko niste pažljivo pročitali uputstvo).
- b) Sve prepravke ili pokušaje popravke od strane neovlašćenih lica.
- c) Oštećenja nastala u toku transporta do kupca.
- d) Normalno trošenje i cepanje opreme ili dodatka

MEDISANA nije odgovorna za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje ovog proizvoda moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs