


**Delovi:**

1. Utikač sa kablom
2. Sedište za masažu
3. Raspored motora (5 masažnih motora za leđa, struk, ramena i butine)
4. Priklučak za utikač sa kablom i adapter
5. Daljinski upravljač
6. Dugme I/O (za uključivanje / isključivanje masažera)
7. Dugme HEAT (LED indikator će svetleti crveno kada je funkcija grejanja uključena)
8. Dugme INTENSITY (za podešavanje intenziteta masaže)
9. Dugme MODE (za izbor tipa masaže)
10. Dugme UPPER BACK (za masažu ramenog dela)
11. Dugme LOWER BACK (za masažu leđa)
12. Dugme HIPS (za masažu kukova)
13. Dugme THIGHS (za masažu butina)
14. Dugme TIMER (za podešavanje vremena trajanja masaže)
15. Petnaest LED indikatora za prikaz izabranih funkcija
16. Džep za daljinski upravljač
17. Adapter i kabl za uključivanje u upaljač u automobilu

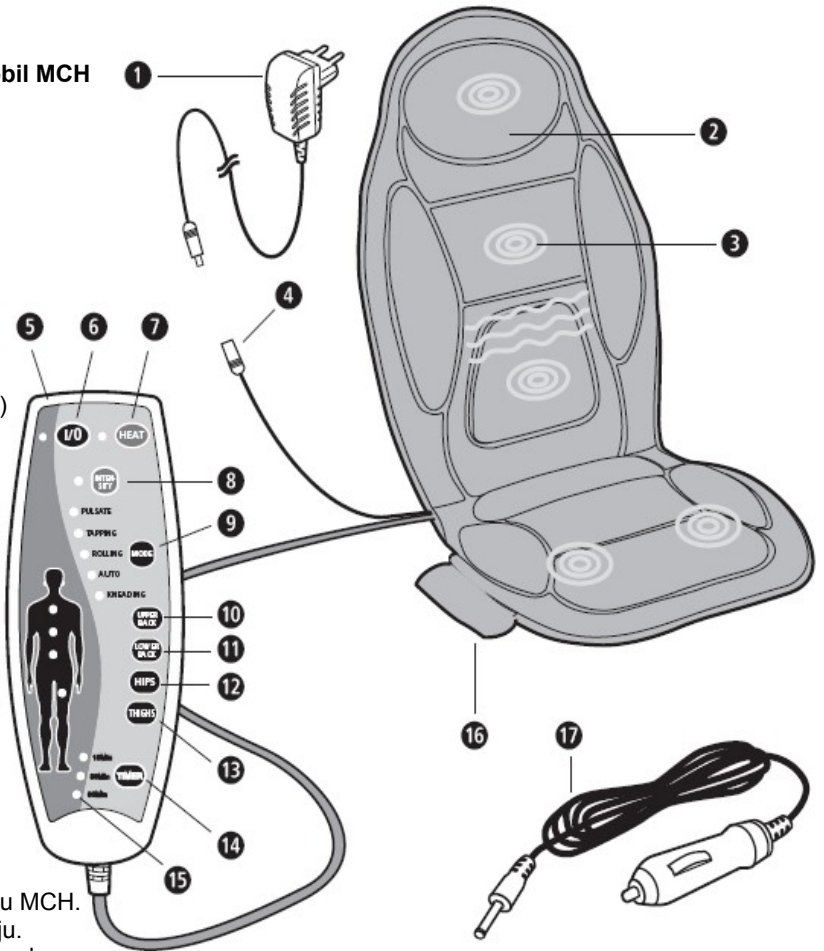

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

**SIMBOLI**



Ovo uputstvo za upotrebu je za sedište za masažu MCH. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju. Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



**UPOZORENJE** Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



**OPREZ** Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



**OBAVEŠTENJE** Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



II kategorija zaštite **LOT** Broj lota Oznaka proizvođača



**SIGURNOSNA UPUTSTVA**

**Uputstva vezana za uključivanje u struju**

- Pre nego što uključite masažer u struju proverite da li je uređaj isključen i da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Kabl uključite u struju samo ako je masažer isključen.
- Koristite samo adapter koji ste dobili u pakovanju.
- Masažer i kabl držite dalje od toplote i toplih površina, vlage i tečnosti. Ne dodirujete utikač ili prekidač za uključivanje mokrim ili vlažnim rukama.
- Nikada ne dodirujte masažer ako je upao u vodu. Isključite ga odmah iz struje.
- Odmah nakon upotrebe isključite masažer iz struje.
- Nikada ne vucite kabl da biste isključili masažer, već izvucite utikač iz struje.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati masažer ili daljinski upravljač za kabl.
- Ne koristite masažer ukoliko primetite vidljiva oštećenja na masažeru i kabl, već se radi sigurnosnih razloga obratite uvozniku.
- Vodite računa da kabl nije tako postavljen da neko može da se saplete. Kabl ne sme biti uvrnut, zaglavljnjen ili upleten.

**Uputstva vezana za specifične grupe ljudi**

- Masažer nije dizajniran za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Ako deca koriste masažer uvek mora da budu pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi koristila masažer za igranje.
- Ne koristite masažer kao dodatak ili da biste zamenili terapiju koju Vam je lekar prepisao. Hronične bolesti i simptomi se mogu u tom slučaju pogoršati.

**Sedište za masažu MCH ne treba da koristite ili se pre upotrebe konsultujete sa lekarom ako:**

- ste u drugom stanju,
- koristite pacemaker, imate veštačke zglobove ili elektronske implante,
- patite od sledećih bolesti: problemi sa cirkulacijom, oboljenja vena, otvorenih rana, modrica, oštećene kože, upale vena.
- Ukoliko osetite bilo kakvu bol ili neprijatnost tokom masaže, odmah prestanite sa korišćenjem i konsultujete se sa Vašim lekarom.
- Ukoliko je uređaj uključen u struju nikada ga ne ostavljajte bez nadzora.

-Vodite računa kada koristite grejač. Nemojte koristiti ukoliko imate problema sa cirkulacijom ili na delovima tela koji nisu osetljivi na toplotu. Može doći do opekotina!

-Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za terapijsku primenu ovog masažera konsultujte se sa Vašim lekarom.

-Ukoliko imate neobjašnjive bolove, ako primete terapiju i / ili koristite medicinska pomagala, konsultujte se sa Vašim lekarom pre korišćenja.

-Masažer koristiti preko odeće.

### Pre korišćenja

-Uvek pažljivo pregledajte kabl, upravljač i masažer pre upotrebe. Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja ne pokušavajte da ga koristite.

-Ne koristite masažer ukoliko primetite vidljiva oštećenja na masažeru i kablu, ako masažer ne radi kako treba ili su sedišta ili upravljač pali na pod ili se nakvasili. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku.

### Korišćenje masažera

-Masažer koristite samo za to predviđenu namenu kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.

-Korišćenje masažera za bilo koju drugu namenu poništava garanciju.

-Nikada ne ostavljajte uključen masažer bez nadzora.

-Maksimalno vreme korišćenja po jednom tretmanu je 60 minuta.

-Vodite računa da masažer ne dođe u kontakt sa šiljatim i oštrim predmetima.

-Ne stavljajte masažer blizu električnog šporeta ili nekog drugog izvora toplote.

-Nemojte koristiti masažer ukoliko je presavijen ili zgužvan.

-Nemojte stajati na masažeru.

-Ne dodirujete utikač ili prekidač za uključivanje ako stojite u vodi i uvek utikač držite samo suvim rukama.

### Važno:



Masažer nije namenjen za komercijalne ili medicinske svrhe. Ukoliko imate bilo kakve sumnje konsultujte se sa Vašim lekarom.

#### BEZBEDNOST NA PUTU

Bezbednost je od najveće važnosti u saobraćaju. Vozač ne bi trebalo da koristi masažer za vreme vožnje. Masažer možete koristiti samo kao putnik ili ako je vozilo parkirano.

Masažer koristite samo u zatvorenom prostoru ili u automobilu.



Masažer ne koristite u vlažnim prostorijama (npr. za vreme tuširanja ili kupanja).

### Održavanje i čišćenje



-Masažer ne zahteva održavanje. Ukoliko dođe do kvara proverite da li je adapter za struju ispravno uključen.

-Masažer možete jedino sami čistiti. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara, ne pokušavajte sami da popravite masažer, jer u tom slučaju gubite pravo na garanciju, za sve popravke obratite se uvozniku.

-Nemojte koristiti masažer ukoliko ima vidljivih znakova oštećenja na uređaju, kablu, ukoliko uređaj ne radi kako treba, ukoliko je masažer ili daljinski ispao ili nakvašen. Kako biste izbegli nezgode uvek sa obratite uvozniku.

-Masažer nemojte potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

-Ukoliko tečnost ipak prodre u uređaj, odmah ga isključite iz struje.

 Nemojte prati.  Nemojte nositi na hemijsko čišćenje.

### Hvala Vam na poverenju!

Kupovinom MEDISANA sedišta za masažu MCH dobili ste kvalitetan proizvod firme MEDISANA. Ovaj masažer je namenjen za masažu leđa i butina. Kako biste osigurali najbolje rezultate i dugoročno zadovoljstvo u korišćenju MEDISANA sedišta za masažu MCH preporučujemo da pažljivo pročitate sledeće uputstvo za upotrebu.

Proverite da li ste dobili kompletno pakovanje koje sadrži: sedišta za masažu MCH sa upravljačem, adapter za struju, adapter za automobil i uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

### Priprema

-Postavite masažer (2) na željenu stolicu (sedišta u automobilu) i pričvrstite ga koristeći trake za pričvršćivanje koje se nalaze sa zadnje strane.

-Uključite utikač (1) ili adapter za automobil (17) u priključak za utikač na masažeru. struju.

-Uključite utikač (1) u struju ili adapter za automobil (17) u upaljač u automobilu.

-Sedite na masažer (2) i upoznajte se sa funkcijama.

### Korišćenje

Masažer ima 4 zone masaže za specifične tretmane. Masažne zone se nalaze u glavnim područjima napetosti mišića (ramena, leđa, struk i butine). Različiti programi masaže sa različitim brzinama se mogu izabrati za svaku zonu masaže.

Masažer će se automatski isključiti kada se izabrano vreme trajanja tretmana završi (15, 30 ili 60 minuta).

### Dugmići na daljinskom upravljaču

**Dugme I/O** (13) (Napajanje električnim naponom)

Uključivanje: pritisnite dugme I/O

Isključivanje: pritisnite ponovo dugme I/O. Da biste ponovo podesili nakon automatskog isključivanja pritisnite ili I/O ili dugme HEAT (7)

Opaz: Vodite računa da ne prekoračite maksimalno vreme trajanja tretmana od 60 minuta.

### Dugme HEAT - grejanje (7)

Pritisnite dugme HEAT (7) da biste uključili grejanje. Kada je grejanje uključeno LED indikator će svetleti crveno. Područje struka se greje. Kada ponovo pritisnete dugme HEAT (7) grejanje će se isključiti. Funkcija grejanja se može uključiti zasebno ili zajedno sa funkcijom masaže.

## Dugme INTENSITY - intenzitet (8)

Pritisnite dugme INTENSITY da biste podesili željeni intenzitet masaže.

## Dugme MODE – tip masaže (9)

Izaberite jednu od funkcija, 1 do 5

**AUTO:** Ovo je standardni tip masaže kada je uređaj uključen. U automatskom modalitetu masažer automatski prolazi kroz sve tipove masaže jednu za drugom. Svakim pritiskom na dugme MODE prebacuje se na sledeći tip masaže.

**KNEADING:** Pritisnite dugme MODE jednom nakon uključivanja. Ovaj tip masaže je sličan šijacu masaži.

**PULSATE:** Pritisnite dugme MODE dva puta nakon uključivanja. Masažni motori naizmenično pulsiraju.

**TAPPING:** Pritisnite dugme MODE tri puta nakon uključivanja.

**ROLLING:** Pritisnite dugme MODE četiri puta nakon uključivanja. U ovom tipu masaže masažni motori se uključuju na takav način da stvaraju osećaj masaže talasa.

**AUTO:** \_ \_ \_

## Masažne zone:

Možete birati između 4 masažne zone u bilo kojoj kombinaciji.

(10) Područje ramena (UPPER BACK)

(11) Područje leđa (LOWER BACK)

(12) Područje kukova (HIPS)

(13) Butine (THIGHS)

Pritiskom na odgovarajuće dugme, možete izabrati ili isključiti određenu zonu masaže. Ako je zona masaže izabrana LED indikator će biti uključen.

## TIMER – vreme trajanja masaže (14)

Pritisnite dugme TIMER da biste podesili vreme trajanja tretmana na 15, 30 ili 60 minuta. LED indikator će se uključiti.

## Čišćenje i održavanje

-Pre nego što počnete sa čišćenjem isključite masažer i izvucite utikač iz struje. Pustite masažer da se dobro ohladi.

-Masažer možete čistiti samo mekanom blago navlaženim sunđerom. Ni u kom slučaju nemojte koristiti agresivne deterdžente, oštre četke, razređivač, benzin ili alkohol. Istrljajte masažer suvom čistom krpom dok ga ne osušite.

-Kada čistite masažer nikada ga nemojte uranjati u vodu i vodite računa da voda ne prodre u uređaj.

-Sačekajte da se masažer potpuno osuši pre nego što ga ponovo koristite.

-Razmrsite kabl ako se zapetlja.

-Masažer bi bilo idealno da čuvate u njegovoj originalnoj kutiji na čistom i suvom mestu.

**Odlaganje:** Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) baciti na za to predviđenim mestima.



Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog distributera radi dobijanja informacija o odlaganju.

## Specifikacija

MODEL	Medisana sedište za masažu MCH
IZVOR STRUJE	100V - 240V ~ 50 – 60Hz 400 mA
NAPAJANJE UREĐAJA NA STRUJU	12V 800 mA
NAPAJANJE UREĐAJA NA UPALJAČ	12V 3 A
POTROŠNJA STRUJE	oko 9,6 W
VREME KORIŠĆENJA	max 60 minuta
TAJMER	Približno nakon 15, 30 ili 60 minuta
USLOVI KORIŠĆENJA	samo u suvim prostorijama
USLOVI SKLADIŠTENJA	na hladnom suvom mestu
DIMENZIJE	približno 110 x 48 cm
TEŽINA	približno 1,1 kg (bez priključka za struju)
DUŽINA KABLA ZA STRUJU	približno 1,8 m
DUŽINA KABLA ADAPTERA	približno 1,8 m
ARTIKAL BROJ	88935
EAN KOD	40 15588 88935 6



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

## GARANCIJA I USLOVI POPRAVKE

U slučaju da imate reklamaciju obratite se uvozniku ili MEDISANA AG direktno. Ako je neophodno da aparat pošaljete navedite šta nije u redu sa aparatom i priložite kopiju računa i popunjen garantni list.

### Garancija pokriva sledeće:

1. Garancija vži tri godine od datuma kupovine. U slučaju reklamacije datum kupovine mora biti potvrđen datumom na računu.
2. Nedostaci uzrokovani proizvođačkom greškom ili greškom u materijalu će biti besplatno popravljani u garantnom roku.
3. Garantni rok se ne produžava nakon izvršene reklamacije. Ovo se odnosi i na aparat i na rezervne delove.

### Ova garancija ne pokriva:

- a) Sve kvarove uzrokovane nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko niste pažljivo pročitali uputstvo).
- b) Sve prepravke ili pokušaje popravke od strane neovlašćenih lica.
- c) Oštećenja nastala u toku transporta do kupca.
- d) Normalno trošenje i cepanje opreme ili dodatata

MEDISANA nije odgovorna za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje ovog proizvoda moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.

## Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: [vanabgd@sezampro.rs](mailto:vanabgd@sezampro.rs), [www.vana.co.rs](http://www.vana.co.rs)