

Kratko uputstvo za upotrebu MEDISANA SMART BABY MONITOR


1. Sadržaj pakovanja:

- 1 x Smart baby Monitor
- 1 x Smart baby Monitor CD
- 1 x Kratko uputstvo za upotrebu
- 1 x Adapter za struju od 5V
- 1 x Plastično postolje
- 1 x Mrežni kabl
- 1 x Antena
- 2 x Šraf
- 2 x Tipl

2. Kratko uputstvo za instalaciju za iPhone®, iPad®, iPod Touch®

Korak 1: Uspostavite vezu

- Povežite antenu sa bežičnim (WIFI) portom i pričvrstite je
- Povežite kameru i ruter mrežnim kablom
- Povežite adapter za struju sa kamerom

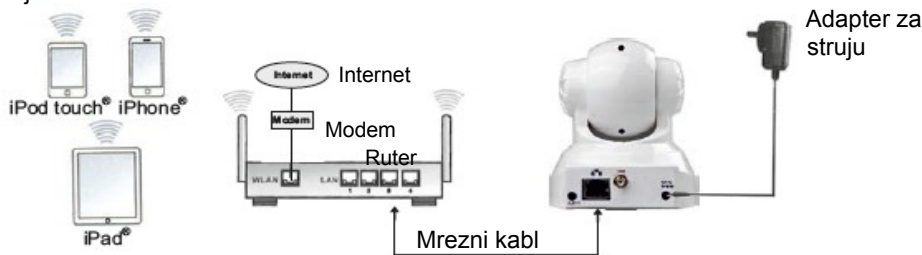


Korak 2: Preuzmite (download) Smart Baby Monitor aplikaciju:

Pokrenite Apple App Store i pronađite "Smart Baby Monitor". Nakon preuzimanja na ekranu vašeg Apple aparata će se pojaviti sledeća ikona: PREUZIMANJE JE BESPLATNO!

Korak 3: Pokrenite aplikaciju i pratite uputstva sa ekrana.

Korak 4: Nakon uspostavljanja WiFi-a (bežične veze), odvojite mrežni kabl i Smart Baby Monitor će raditi preko Wi-Fi veze.

3. Kratko uputstvo za instalaciju za PC (računar)

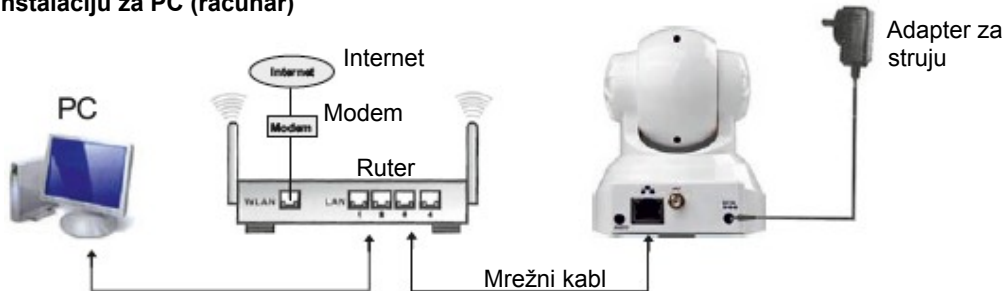

I. Pristup kameri preko lokalne mreže

Korak 1: Stavite dobijeni CD u CD-ROM čitač.


Korak 2: Dvaput kliknite na alat za pretragu programa na CD-u i konfigurirate IP adresu na način prikazan niže:

Korak 3: Kliknite na "Search (F3)" (1), pa kliknite na pronađeni aparat (2).

Korak 4: IP adresu (3) bi DHCP trebao da dodeli automatski i ona bi trebala da bude ista kao i pod "Local PC information", osim za zaokruženi broj. Ukoliko to nije slučaj, nastavite sa korakom 5, u suprotnom pređite na korak 6.

Korak 5: Unesite informaciju o autentifikaciji (4). Fabričko podešavanje za "Account for watching" je "admin", a za "Password for watching" je "medisana". Kliknite na "Update (F5)" (5).

Korak 6: Sada kliknite na "Search (F3)" (1), pronađeni aparat (2) i "Browse (F4)" (6). Pojaviće se sigurnosni prozor prikazan niže. Unesite korisničko ime (fabrički: "admin") i šifru (fabrički: "medisana") da biste pristupili kameri.

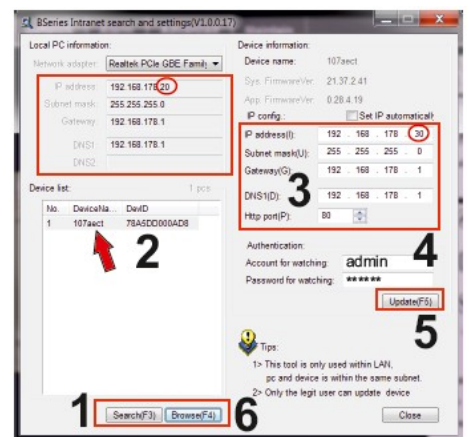

II. Pristup kameri preko Interneta

Smart Baby monitoru se može pristupiti preko Interneta. Za detaljnije informacije pogledajte korisničko uputstvo.

3. Kratko uputstvo za instalaciju za MAC

Korak 1: Pokrenite "FindStartBabyMonitorWithMac" aplikaciju sa CD-a.

Korak 2: Nakon nekog vremena kamera sa IP adresom će se pojaviti na listi. Dva puta kliknite na pronađeni aparat. Otvoriće se Vaš browser (podrazumevani pregledač). Nastavite na način opisan u korisničkom uputstvu.

OBAVEŠTENJE:

Ukoliko ne vidite IP adresu, Vaš ruter nije konfigurisan za DHCP uslugu ili ne radi ispravno. Ponovo pokrenite kameru ili postavite IP ručno duplim klikom na aparat.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs

