

UPUTSTVO ZA UPOTREBU MEDISANA MINI MASAŽER MMI



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.



SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Uređaj je namenjen samo za ličnu upotrebu.
- Konsultujte se sa Vašim lekarom pre upotrebe ukoliko imate bilo kakve nedoumice.
- Masažer koristite samo u za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu, jer će u suprotnom to dovesti do poništavanja garancije.
- Ako za vreme korišćenja osetite bilo kakav bol ili nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem masažera i obratite se lekaru.
- Ne bi trebalo da koristite masažer ako imate jednu ili više od nabrojanih bolesti i stanja: bolesti poremećaja venske cirkulacije (tromb), proširene ili upaljene vene, ako imate otvorene rane, modrice, otko, zapaljenje vena ili trombozu.
- Ako ste u drugom stanju nemojte koristiti masažer.
- Posebnu pažnju obratite kada se uređaj koristi u blizini dece, bolesnih ljudi i posebno ljudi sa specijalnim potrebama.
- Nemojte dozvoljavati deci da koriste uređaj kao igračku. Uređaj čuvajte van domašaja dece.
- Nemojte dozvoljavati deci da se igraju pakovanjem jer postoji rizik od gušenja.
- Ne koristite masažer direktno na glavi, kostima i zglobovima, sa prednje strane grla, na ili u blizini karotidne arterije, u području genitalija ili oko bubrega.
- Nemojte koristiti masažer duže od 20 minuta. Ostavite uređaj da se ohladi približno 30 minuta pre ponovnog korišćenja.
- Nemojte koristiti uređaj ako se pokvari. Nemojte sami pokušavati da ga popravite, već se obratite uvozniku.
- Zaštitite uređaj od vlage. Ako tečnost ipak prođe u uređaj, odmah izvadite baterije i nemojte ga koristiti, već se obratite uvozniku.
- Ukoliko ne planirate da koristite uređaj duže vreme izvadite baterije.
- Masažer koristiti preko odeće

SIGURNOSNA UPUTSTVA VEZANA ZA BATERIJE


Čuvati van domašaja dece! Ne puniti baterije! Ne bacati u vatru! Ne praviti kratki spoj! Može doći do eksplozije! Ne bacati istrošene baterije zajedno sa smećem iz domaćinstva. Bacite ih na posebno predviđena mesta ili ih predajte ovlašćenom prodavcu.

DELOVI

- 1.Sigurnosni (provodni) osigurač
- 2.Dugme ON/OFF
- 3.Masažne glave
- 4.Odeljak za baterije

Proverite da li se u pakovanju nalazi: Medisana mini masažer MMI, 3 baterije (1,5V tip AAA) i uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

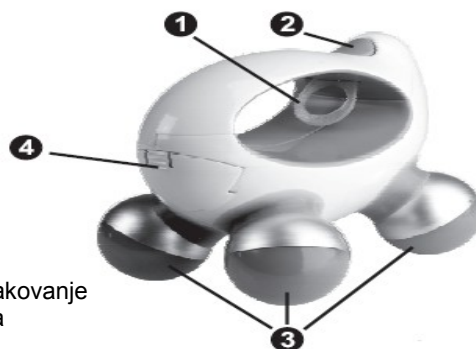

KORIŠĆENJE



Masažer ima „TRY-ME“ (probnu) funkciju. Sigurnosni provodni osigurač (1) sprečava da se dugme ON/OFF (2) zaključa kada ga pritisnete. To znači da masažer može da se koristi samo dok je dugme pritisnuto. Sigurnosni osigurač (1) mora biti sklonjen (izvučen) za normalnu upotrebu. Nakon što jednom pritisnete dugme ON/OFF (2), masažer počinje da radi. Pritisnete dugme ponovo da biste isključili masažer.

ZAMENA BATERIJA

Zamenite baterije kada intenzitet masažnih glava (3) oslabi. Odeljak za baterije (4) se nalazi sa zadnje strane. Otvorite poklopac tako što ćete ga pritisnuti na dole i postavite 3 nove baterije od 1,5V tip AAA. Prilikom postavljanja vodite računa o polaritetu baterija (označen je u unutrašnjosti odeljka za baterije). Zatvorite poklopac.

ŠTA JE MASAŽA

Masaža je jedna od najstarijih metoda lečenja i važan deo fizioterapije. Mehaničkim tretiranjem tela opušta napete mišiće, poboljšava cirkulaciju i pomaže regeneraciju tkiva. Masaža je stimulaturna, opuštajuća i pomaže uklanjanju bola nerava i mišića. Masaža takođe može pozitivno uticati i na vaskularni sistem, unutrašnje organe i metabolizam. Postoje pet klasičnih tipova masaže: blaga masaža, „gnječenje“, „lupkanje“, masaža vibracijama kao i masaža „tapkanjem“. Osim toga, postoje i druge važne tehnike masaže kao što su ručna limfna drenaža, refleksologija, hidro masaža, masaža „četkanjem“ i masaza prstima (šijacu i akupresura).

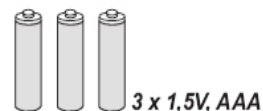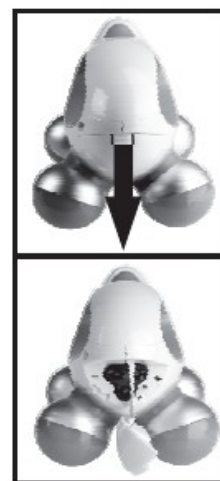

KAKO MINI MASAŽER MMI RADI

Ovaj masažer radi na principu vibracione masaže. 4 masažne glave (3) počinju da vibriraju i sijaju u boji nakon što pritisnete dugme ON/OFF (2).

ISPRAVAN NAČIN MASAŽE

Možete masirati sebe ili partnera. Uključite masažer i postavite na deo tela koji želite da masirate. Nemojte pritiskati već samo lagano postavite masažne glave (3) na telo. Nemojte masirati samo jedan deo tela previše dugo, već radije češće menjajte područje masaže.

UPOZORENJE

Za vreme masaže samo blago pritisakajte! Previše jak pritisak može dovesti do povreda i / ili oštećenja na uređaju!

-Izborom smera masaže možete uticati na efekte: masaža prema srcu opušta, a masaža u smeru suprotnom od srca stimuliše.

-Svaki tretman ne bi trebalo da bude duži od 20 minuta. Da biste osigurali pozitivne rezultate, masažer koristite redovno.

-Masaža bi trebalo da ima prijatan osećaj. U slučaju da osetite bol ili neprijatnost za vreme masaže, prestanite sa korišćenjem i konsultujete se sa lekarom.

-Nakon tretmana isključite uređaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Izvadite baterije pre čišćenja. Uređaj čistite koristeći mekanu krpnu navlaženu blagom sapunicom. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili alkohol. Nemojte izlagati uređaj direktnom sunčevom svetlu i zaštitite ga od vlage. Sačekajte da se uređaj potpuno osuši pre nego što ga ponovo koristite. Čuvajte ga na čistom i suvom mestu.

ODLAGANJE



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) baciti na za to predviđenim mestima. Pre nego što bacite uređaj izvadite baterije. Baterije ne bacajte sa smećem iz domaćinstva, već na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

SPECIFIKACIJA

Model	Medisana mini masažer MMI
Dimenzije	12,5 x 9 x 10 cm
Težina	Približno 180 g
Izvor struje	3 x baterije od 1,5V tip AAA
Short operation	20 minuta
Broj artikala	88501 pink / 88502 plavi / 88203 zeleni
EAN broj	40 1558 888501 3 / 40 1558 888502 0 / 40 1558 888503 7



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs