

Uputstvo za upotrebu Solarna kućna vaga PSS

Delovi:

1. Solarna ćelija
2. Prekidač za podešavanje jedinice merenja za kilograme / funte (nalazi se sa donje strane vage)
3. Displej
4. Deo za stajanje



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

Simboli



Ovo uputstvo za upotrebu je za solarnu kućnu vagu PSS. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju. Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



Oznaka proizvođača



Sigurnosna uputstva

Bilo koji oblik terapije ili dijete za osobe sa premalom ili prevelikom težinom zahteva stručno savetovanje profesionalca (doktor, nutricionista). Vrednosti dobijene merenjem na vagi mogu se koristiti kao korisni dodatak.



Opasnost od prevrtanja!

Ne postavljajte vagu na neravnu površinu. Vodite računa da kada stojete na vagu ne stanete na uglove vage. Nikada nemojte stajati na uglovima / ivicama vage.



Opasnost od klizanja!

Nemojte stajati na vagu vlažnim ili mokrim stopalima. Skinite čarape pre nego što stanete na vagu.

-Vagu koristite samo u za to predviđene svrhe koje su opisane u uputstvu za upotrebu.

-Garancija će biti nevažeća ako je vaga korišćena u svrhe za koje nije namenjena.

-Vaga je namenjena za kućnu upotrebu. Nije namenjena za korišćenje u komercijalne svrhe u bolnicama ili medicinskim ustanovama.

-Nemojte koristiti vagu ako radi nepravilno, ukoliko je došlo do pada, ako je upala u vodu ili je oštećena.

-Maksimalna težina za koju je namenjena vaga je 180 kg / 396 lb. Nemojte preopterećivati vagu.



Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu. Ako postavite vagu na mekanu i neravnu površinu dobijeni rezultati mogu biti netačni.



Nemojte koristiti vagu u uslovima ekstremno visoke temperature i vlažnosti vazduha.

Držite vagu dalje od vode.



Rukujte vagon pažljivo. Vaga ne sme biti izložena udarcima ili vibracijama. Vodite računa da ne ispustite vagu. Pažljivo stanite na vagu.

Nemojte pokušavati da rasklopite vagu, u suprotnom će garancija biti poništena. Vaga ne sadrži delove kojima je potrebno održavanje ili zamena od strane korisnika.

Ne pokušavajte sami da popravite vagu u slučaju kvara jer će to dovesti do poništavanja garancije. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku.

Hvala na poverenju!

Kupovinom solarne kućne vage PSS dobili ste proizvod vrhunskog kvaliteta firme MEDISANA. Ova vaga je namenjena za merenje telesne težine (max 180 kg). Da biste postigli željene rezultate Vašom MEDISANA solarnom vagom PSS duži vremenski period, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje.

Proverite da li se u pakovanju nalazi: solarna kućna vaga PSS i uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno.

Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Preduslovi koji moraju biti ispunjeni da biste dobili tačne i pouzdane rezultate merenja:

-Uvek se merite u istim uslovima

-Uvek se merite u isto vreme

-Stanite uspravno i mirno bez pomeranja za vreme merenja

-Poželjno je da se merite ujutro nakon kupanja ili tuširanja vodeći računa da su Vam stopala suva


Ukoliko se redovno merite možete dobiti pouzdane informacije o kretanju Vaše telesne težine.

Korišćenje solarne energije

Ovo je solarna vaga i zahteva određenu jačinu svetlosti da bi ispravno funkcionisala. Postavite vagu na stabilnu i čvrstu površinu izloženu direktnom prirodnom ili svetlu u prostoriji (kao na slici).

Pre prve upotrebe neophodno je da se solarne ćelije inicijalno napune najmanje 10 minuta. Ako solarna energija nije dovoljna na displeju će biti prikazano „LO“. U tom slučaju pomerite vagu na svetlije mesto. Ako je mesto merenja previše tamno postoji mogućnost da na displeju čak neće biti prikazano ni „LO“ ni „0.0“.

Konstantnost u korišćenju obezbeđuje jačina svetlosti od približno **100 LUX**, što odgovara normalom svetlu u prostoriji.

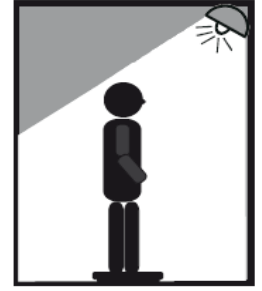

Merenje

1. Postavite vagu na stabilnu i čvrstu površinu. Sve četiri nožice moraju dodirivati pod. Ako postavite vagu na neravnu ili mekanu površinu to može uticati na tačnost merenja.
2. Uvek se merite na istoj vagi, na istom mestu i u isto vreme. Merite se bez odeće, pre obroka, po mogućnosti ujutro pre doručka.
3. Ako stanete sa obe noge na vagu na displeju će se pojaviti „0.0 kg“. Brojevi na displeju će se menjati, kako vaga bude određivala Vašu težinu. Kada je merenje završeno displej će dva puta zatreperti i prikazati Vašu težinu. Sve dok stojite na vagi na displeju će biti prikazana Vaša težina. Siđite sa vage. Vaga se automatski isključuje za 8 sekundi.

Napomena: Ako je vaga transportovana ili pomerana morate je inicijalizovati pre korišćenja. Lagano udarite površinu vage nogom. Na displeju će biti prikazano „0.0 kg“ ili („0.0 lb“). Sačekajte da se vaga isključi. Vaga je sada spremna za merenje. Ako vaga nije pomerana, ova procedura nije neophodna.

Izbor jedinice merenja

Možete menjati jedinice merenja na Vašoj Medisana solarnoj vagi PSS. Pritiskajući crni prekidač (2) na donjoj strani vage izaberite željenu jedinicu merenja (kg ili lb).

Moguće greške i rešenja

Na displeju se mogu pojaviti sledeće poruke o greškama:

- „LO“ Solarne ćelije ne obezbeđuju dovoljno energije. Pomerite vagu na svetlije mesto i sačekajte najmanje 10 minuta pre nego što ponovo upotrebite vagu, kako bi se solarne ćelije napunile.
- „ERR“ Vaga je preopterećena.

Čišćenje i održavanje

Nemojte koristiti jak deterdžent ili čvrste četke za čišćenje. Koristite blagi deterdžent za pranje sudova, a površinu čistite samo blago navlažneom krpom. Vodite računa da voda ne prodre u uređaj. Nemojte uranjati vagu u vodu. Nakon čišćenja možete ponovo koristiti vagu tek kada je potpuno suva. Nemojte izlagati vagu direktnom sunčevom svetlu, zaštitite je od prljavštine i vlage.

Deponovanje



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Uređaj koje više ne koristite bacite na za to predviđena mesta. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Specifikacija

Model	Medisana solarna kućna vaga PSS
Raspon merenja	Max 180 kg / 396 lb
Podeoci	Po 100 g / 0,2 lb
Karakteristike	Kućna solarna vaga sa digitalnim displejem
Dimenzije (D x Š x V)	Približno 31,9 x 31,9 x 2,3 cm
Težina	Približno 1,85 kg
Uslovi korišćenja	Temperatura od 5° – 35°C / 41° – 95° F; Relativna vlažnost vazduha < 80%
Uslovi skladištenja	Temperatura od -10° – 50° C / 14° – 122° F
Artikal broj	40470
EAN broj	4015588 40470 2



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs