

Uputstvo za upotrebu ELEKTRIČNA PODLOGA ZA SPAVANJE HDP



Upravljač:

1. LED indikator kada je električni jastuk uključen
2. Klizni upravljač - prekidač
3. Upravljač prednja strana
4. Upravljač zadnja strana



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

Simboli



Ovo uputstvo za upotrebu je za električnu podlogu za spavanje HDP.

Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju.



Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



Kategorija zaštite II **LOT** Broj lota  Oznaka proizvođača



Nemojte bušiti iglama.



Nemojte koristiti zagrejanu podlogu kada je presavijena ili naborana.



Nemojte je koristiti van zatvorenog prostora.



Električnu podlogu možete ručno prati.



Nemojte koristiti hlor pri čišćenju.



Nemojte zagrejanu podlogu sušiti u mašini za sušenje.



Nemojte peglati zagrejanu podlogu.



Nemojte je nositi na hemijsko čišćenje.

Sigurnosna uputstva

- Pažljivo proverite električnu podlogu pre svake upotrebe da vidite da li ima oštećenja.
- Ukoliko primetite oštećenja na podlozi, prekidaču ili kابلu, prestanite sa upotrebom.
- Pre nego što uključite električnu podlogu u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Električnu podlogu nemojte savijati, gužvati, zamotavati u navlaku ili zavlačiti ispod dušeka za vreme upotrebe.
- Nikada nemojte stavljati zihernadle, igle ili bilo koje oštre ili zašiljene predmete na električnu podlogu.
- Ne koristite električnu podlogu kod dece, invalida, kod osoba koje spavaju, kao i osoba neosetljivih na toplotu.
- Deca uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe kako ne bi koristila električnu podlogu za igranje.
- Nikada nemojte ostavljati električnu podlogu uključenu bez nadzora.
- Vodite računa da ne zaspate dok je električna podloga uključena.
- Previše dugo korišćenje na najvišem intenzitetu može dovesti do opekotina.
- Nikada ne dodirujte električnu podlogu koja je upala u vodu. Isključite je odmah iz struje.
- Uvek vodite računa da kabl ne bude u blizini toplih površina.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati električnu podlogu za kabl i vodite računa da se kabl ne zaplete ili umrsi.
- Nikada ne koristite mokru električnu podlogu ili u vlažnim uslovima (npr. u kupatilu ili slično).
- Nemojte izlagati bilo kakvoj vlazi prekidač za upravljanje ili kabl.
- Ukoliko dođe do kvara nemojte sami popravljati električnu podlogu. Za sve popravke obratite se uvozniku.
- Električnom podlogom možete upravljati samo upravljačem koji ste dobili u pakovanju (HDP).
- Pre nego što složite i odložite podlogu, pustite da se potpuno ohladi. Vodite računa prilikom slaganja da je previše ne stežete.
- Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa Vašim zdravljem konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ukoliko imate konstantne bolove u mišićima ili zglobovima, konsultujte se sa lekarom. Konstantni bolovi mogu biti simptomi neke ozbiljne bolesti.
- Ukoliko za vreme korišćenja osetite bilo kakvu neprijatnost ili bol, odmah prestanite sa korišćenjem.
- Ako se kabl za struju ošteti, može ga zameniti samo ovlašćeni serviser.
- Električna podloga nije dizajnirana za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Električna podloga je namenjena samo za kućnu upotrebu i ne bi trebalo da se koristi u bolnicama.
- Za vreme korišćenja kontrolni upravljač i kabl za struju ne smeju biti postavljeni na ili ispod podloge ili na bilo koji način pokriveni.
- Pre korišćenja na krevetu koji se može podešavati, vodite računa da ne uštinete ili izgužvate podlogu.


Hvala na poverenju !

Kupovinom MEDISANA električn podloge za spavanje HDP dobili ste kvalitetni proizvod nemačke firme MEDISANA. Da biste postigli željene efekte u dugom vremenskom periodu, preporučujemo da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje.

Proverite da li ste dobili kompletno pakovanje koje treba da sadrži električnu podlogu za spavanje HDP sa upravljačem koji se može skinuti i uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

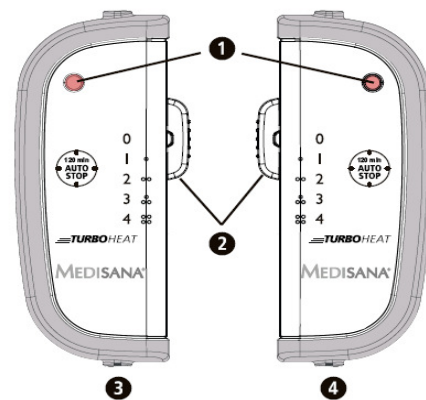

Upravljač za podešavanje temperature

Korišćenje

Sa MEDISANA električnom podlogom za spavanje HDP možete blago zagrejati i opustiti razne delove tela. Korišćenjem električne podloge stimuliše se cirkulacija u delovima tela gde su mišići napeti i pomaže vam da se opustite nakon napornog dana. Električna podloga za spavanje HDP obezbeđuje prijatno topao krevet, što će Vam omogućiti da se opustite i brzo zaspate. Raširite podlogu ravno preko sredine dušeka i stavite čaršav preko. Kada koristite podlogu za spavanje vodite računa da se ne izgužva, presavije ili nabora. Podlogu možete koristiti samo ako je ravno položena. Električna podloga ima električnu kontrolu temperature koja se reguliše izborom željene temperature.

Vodite računa da je kabl dobro povezan sa podlogom i upravljačem. Uključite električnu podlogu u struju i pomerite prekidač sa pozicije 0 na poziciju 1. Žuto LED indikator će se uključiti (faza zagrevanja), a kada dostigne zadatu temperaturu LED indikator će svetleti zeleno. Posle nekoliko minuta osetićete kako se podloga primetno zagreva. Ukoliko Vam je potrebna viša temperatura pomerite prekidač na poziciju 2, 3 ili poziciju 4 za postizanje maksimalne temperature. Ukoliko podloga postane previše vruća, možete smanjiti temperaturu pomeranjem prekidača na poziciju 3, 2 ili 1.

Da biste isključili električnu podlogu, pomerite prekidač na poziciju 0. LED indikator će se isključiti, što znači da je električna podloga isključena, a zatim isključite električnu podlogu i iz struje. Pomerite prekidač na poziciju 1 za kontinuiranu upotrebu. Električna podloga će se sama automatski isključiti nakon 120 minuta neprekidne upotrebe. Da biste je ponovo uključili, pomerite prekidač prvo na poziciju 0, a zatim u zavisnosti od željene temperature na poziciju 1, 2, 3 ili 4. Isključite električnu podlogu iz struje kada je ne koristite.

Napomena: Kontrolni upravljač postaje vruć tokom korišćenja!

Problemi i rešenja

Ovaj uređaj je opremljen aktivnim zaštitnim sistemom APS TECH. Uređaj detektuje različite uzroke kvara i emituje odgovarajući zvučni signal ukoliko je potrebno. U slučaju kvara LED indikator će svetleti crveno.

3 zvučna signala u intervalu od 1 sekunde i LED indikator svetli crveno:

Kabl kontrolnog upravljača nije dobro povezan sa električnom podlogom ili je u pitanju neki drugi električni kvar. Proverite povezanost kabla. Ukoliko je kabl dobro povezan, nemojte koristiti električnu podlogu i obratite se uvozniku.

Konstantni zvučni signali i LED indikator svetli crveno:

Prvo proverite da li ste upravljač podesili na dobru poziciju. Važne komponente su oštećene ili je u pitanju kratak spoj. Nemojte koristiti električnu podlogu i obratite se uvozniku.

Ukoliko električna podloga ne reaguje nakon što se uključi (LED indikator ne svetli i ne čuje se zvučni signal), proverite da li je podloga dobro uključena u struju. Ukoliko je podloga dobro uključen u struju, a ne radi to znači da je pokvarena i nemojte je koristiti i obratite se uvozniku.

Čišćenje, održavanje i čuvanje

- Pre pranja električnu podlogu isključite iz struje i ostavite da se potpuno ohladi najmanje 10 minuta.
- Električna podloga ima upravljač koji se može skinuti (HDP). Skinite upravljač sa električne podloge tako što ćete izvući kabl koji ih povezuje sa donje strane.
- Podlogu čistite mekanom četkom kada je suva.
- Podlogu možete pažljivo ručno oprati. Idealno bi bilo da stavite podlogu u kadu u mlaku vodu i sa malo blagog deterdženta i da ga nežno pritiskate.
- Isperite podlogu nekoliko puta dok ne isperete sav deterdžent.
- Nikada nemojte koristiti jake deterdžente ili oštre četke.
- Da biste ga osušili položite je na peškir ili podlogu koja dobro upija vodu.
- Podlogu možete ponovo koristiti tek kada se potpuno osuši.
- Ponovo spojite upravljač sa podlogom vodeći računa da to ispravno uradite. (Pogledajte sliku – strelice su okrenute jedna prema drugoj)
- Redovno otpetljavajte kabl ukoliko se zapetlja.
- Podlogu ostavite da se dobro ohladi pre nego što je presavijete i odložite. Vodite računa prilikom slaganja da je previše ne stežete. Idealno bi bilo da podlogu čuvate složenu u originalnom pakovanju na suvom i čistom mestu.



Deponovanje



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) bacati na za to predviđenim mestima.

Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

SPECIFIKACIJA

Naziv:	MEDISANA ELEKTRIČNA PODLOGA ZA SPAVANJE HDP
Izvor struje:	230 V ~ / 50 Hz
Izlazna toplina:	100 W
Automatsko isključivanje	za približno 120 minuta
Dimenzije	oko 150 x 80 cm
Težina:	860 g
Dužina kabla:	2,6 m
Uslovi za rad:	Koristiti samo u suvim prostorijama kao što je opisano u uputstvu za upotrebu
Uslovi skladištenja:	Položite ga ravno na suvom i čistom mestu
Artikal broj:	60204
EAN broj:	40 15588 60204 7



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:
VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533.
e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs